

一般家庭用  
保管用



このたびは、ケノンをお買い上げ頂きましてありがとうございます。  
安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
この取扱説明書は、いつもお手元におき、ご使用ください。

ご使用前の  
前

使い方

困った  
ら

お手  
入れ

## 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき使用者様や周りの方への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 使用方法をあやまると火傷、炎症など肌トラブルが発生する可能性があります。危険性を十分にご理解頂き、以下の事項を必ずお守り頂いた上で自己責任の下でご使用下さい。商品を使用してヤケド等の問題が発生した場合でも、当社では如何なる責任も負いかねますのでご了承下さい。また注意事項等は随時変更となる可能性がありますので「ケノン公式ユーザーサポートサイト」( <http://ke-non-user.com/> )で最新情報を必ずご確認ください。



### 危険

人が死亡または重傷を負う危険が生じる切迫の度合いが想定される内容を示しています。



### 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

人が傷害を負う可能性、或いは物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### ●絵表示の例



危険・警告・注意を促す内容があることを示します。



禁止の行為であることを示します。



行為を強制したり指示したりする内容を示します。



## 危険



禁止

- 下記のような医療用電子機器をお使いの方はこの製品を使用しないでください。
  - ・ペースメーカー等の体内植込型電子医療機器
  - ・人工心肺等の生命維持用電子医療機器
  - ・心電計等の装着型の電子医療機器
 電子医療機器の誤作動をまねくおそれがあります。



## 警告

- 目には直接照射しない。  
目を痛める原因になることがあります。
- ホクロ、刺青または皮膚疾患のある部位に照射しない。  
肌のやけど(ケロイド)の原因になります。
- コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない。  
感電・ショート・発火のおそれがあります。
- コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。  
また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。  
感電・発火のおそれがあります。
- メインスイッチがONのまま電源コードを抜き差ししない。  
感電や火災の原因になります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。  
(たこ足配線など)発熱により火災の原因となります。
- 異常や故障時には、使用をしない。  
発熱や感電などによる火災や怪我の原因になります。
- ベンジン、シンナーなど有機溶剤で拭いたり、殺虫剤などを掛けたりしない。  
ひび割れ等による怪我、ショートなどによる感電や発火の原因になります。
- 本体を裏返して使用したり、付近に子供やペットがいる状態で使用しない。  
思わぬ事故や怪我、感電、火災の原因になります。
- 電子レンジに入れない。故障や火災の原因になります。
- 高压容器に入れない。故障や思わぬ事故の原因になります。
- ハンドピースの通風口を塞がない。故障、発熱、発火の原因になります。
- 2時間以上は連続使用しない。故障の原因になります。
- 汚れが付着したカートリッジを使用しない。  
故障、事故、発火、ランプ破損の原因になります。
- ハンドピースのランプを直接触らない。
- 空中に向けて照射しない。皮膚に完全に当たった状態で使用して下さい。
- 鼻尖と左右それぞれ耳の中心を直線で引いた線より上の部分(まつ毛、まゆ毛、こめかみ、まぶた、ひたい、目など)には照射しない。



禁止

## 安全上のご注意

### 警告



禁止

- 本体を寒い場所から温かい場所に移動した直後に使用しない。  
誤動作、故障、発火の原因となります。
- 一切の業務利用を行わない。  
本製品は一般家庭用製品であり、過剰なご利用は故障の原因となります。
- 以下のような場所では使用しないで下さい。
  - ・ 水平でない場所や不安定な場所、高い場所。  
落下や転落による怪我や感電、火災などの原因となります。
  - ・ 押し入れや引き出しの中など狭い場所。  
風通しが悪い場合、温度が高くなり発熱や発火の原因となります。
  - ・ 直射日光、雨風の当たる場所や水場（浴室、洗面所、トイレ、キッチン等）  
感電や火災の原因となります。
  - ・ 薬品などの化学物質を扱う場所。  
空気中の薬品で製品が劣化し、発熱や発火の原因となります。
  - ・ 油や可燃性ガスを使ったり、粉じんが多い場所。  
引火や本体への吸引吸着による発火発煙の原因となります。
  - ・ 火気や暖房器具が近くにある場所。  
引火、発熱、発火の原因となります。
  - ・ 高周波を利用した家電製品（テレビ、電子レンジ、ラジカセなど）を使用している場所。  
誤作動による事故の原因となります。
  - ・ 日本国外での利用は保証対象外となります。またサポートは日本国内のみでの対応となります。
- 水につけたり、水やペットのおしっこをかけたり、水洗いしない。



ぬれ手禁止

- 濡れた手で使用しない。  
感電・発火のおそれがあります。



水ぬれ禁止

- 水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。  
感電・発火のおそれがあります。



分解禁止

- 製品を絶対分解しない。  
火災・感電・けがの原因となります。  
修理はお買い上げの販売店または、お客様相談窓口にご相談ください。

### 注意



必ず守る

- コンセントから電源プラグを抜くときは、コードを持たずに電源プラグを持って引き抜く。  
感電・ショート・発火原因になります。
  - 割れたカートリッジ、本体は使用しない。  
コネクタを直接手で触ったり、ピンなどを近づけない。  
感電のおそれがあります。
  - 照射の際は必ずサングラスをかける。  
目に障害を与えるおそれがあります。
  - 子供の手の届かないところに保管し、使わせない。  
事故やトラブルのおそれがあります。
  - 日焼けした肌、体調のすぐれない時や・身体に異常を感じる時は使用しない。  
やけどのおそれがあります。
  - 照射部位は重ならないようにする。  
やけどのおそれがあります。
  - 本使用前に必ずスキントストをおこなう。  
やけどのおそれがあります。
  - ローション、オイル等を塗ったままの照射は避ける。  
やけどのおそれがあります。
  - 市販の冷却ジェルやクリームを肌に塗布して照射はしない。  
故障や肌トラブルの原因となるおそれがあります。
- 
- 次のような方及び部位には使用しないで下さい。  
怪我や火傷などの肌トラブル、思わぬ事故の原因となります。
    - ・ 使用方法を熟知していない方
    - ・ 未成年及び高齢者の方
    - ・ 妊婦及び授乳中の方
    - ・ ステロイド等の薬物を持続的に使用されている方
    - ・ 4週間以内に強い太陽光を受けられたり、日焼けをされた方
    - ・ 刺青及び永久化粧部位等をされている方
    - ・ 色素が濃く沈着された方及び部位
    - ・ 糖尿及び他疾患による皮膚異常症患者の方
    - ・ 光過敏症等の光に関する疾患をお持ちの方



禁止

## 安全上のご注意

### ⚠ 注意



禁止

- ・ 癲癇患者の方
- ・ 心臓ペースメーカーなど体内埋め込み式医療電子機器、人工心臓など生命維持装置をご使用の方
- ・ 皮膚癌病歴がある方や皮膚癌発病率が高い方
- ・ 3ヶ月以内に放射線治療や化学療法を受けた経験のある方
- ・ 他に光過敏症反応を起こす要素がある薬物やローション等を1ヶ月以内に使用した方
- ・ 体調不良、飲酒後、薬服用中、疲労が激しい方
- ・ アレルギー体質、皮膚病、アトピー、敏感肌、生理中、血液異常、紫斑になりやすい方
- ・ 意思表示が出来ない方
- ・ 知覚障害、高血圧、骨疾患の方
- ・ 粘膜、かさぶた、傷、湿疹、あざ、いぼ、吹き出物、皮フがん、タムシ(白せん)、毛のう炎などの部位
- ・ 毛胞炎、かぶれ、虫刺、腫れ物、にきび、皮膚炎、傷のある皮膚などの部位
- ・ シリコンが埋めてある部位、アキレス腱などの部位
- ・ 麻痺している部位
- ・ 帝王切開手術やその他手術を受けた部位
- ・ 化粧品やオイルなど化粧品が残っている部位
- ・ 金属やプラスチックなど

●唇や目の周りなど皮膚の敏感な部位には使用しない。  
やけどのおそれがあります。



水場使用禁止

●風呂場など湿気の多い場所での使用や保管はしない。  
感電・故障のおそれがあります。

#### ●ご確認事項

- (1)3年以上使用した場合の事故については、当社は責任を負いかねる場合もありますので、予めご理解をお願いします。
- (2)お客様の不注意による破損・故障・ケガ・事故・火災に関して、製造者・販売者は一切の責任を負いません。
- (3)本取扱説明書の記載内容、ご利用規約、サポートサイトに記載された事項等を守らないことによる生じた損害に関して、製造者・販売者は一切の責任を負いません。上記事項をご確認、ご同意の上厳守して下さい。ご同意頂けない場合は商品を利用しないで下さい。
- (4)この商品は、新たなカートリッジ(ストロングカートリッジに限らず)を装着することで、従来のご利用方法が拡張される場合がございます。ご使用になる前には、都度「ケノン公式ユーザーサポートサイト」(<http://ke-non-user.com/>)にて、更新情報を随時ご確認下さい。
- (5)日本国外でのご利用及び日本語を完全に理解頂いていない方は、メーカー保証を含め、一切の保証、サポートがご利用になれません。

安全上のご注意	2
ご利用の前に	8
製品仕様	9
各部の名前	10
照射する周期について	12
照射できる部位	13
本格的なご使用前に必ずおこなってください	14
オプション機能の使い方	16
照射のしかた	18
スキンケアのしかた(オプション機能)	21
Q&A	24
故障かな?と思ったら	26
カートリッジのお手入れ	28
まゆ毛脱毛器の使い方	29
保証書	31

ご使用前に

使い方

困ったら

お手入れ・保証

## ご利用の前に

## 製品仕様

製品をより安全にご利用頂く為、以下の事項を十分に確認頂き、ご同意をお願い致します。

ケノンの使用感は、ご利用者様の毛の太さや色、質、毛周期などによって、大きな個人差がございます。購入者様が投稿されていらっしゃるレビューでは、1回～2回で、というお声もございますが、同じお客様でも部位によって、ご利用回数、期間は異なって参ります。この点はサロンによる脱毛サービスでも同様です。2週間に1回程度を目安に、4回～5回程度、繰り返しご利用頂くことで、多くのお客様に、むだ毛のお手入れが楽になる事をご実感頂ける事が多いようです。毛周期、毛の質には個人差がございます事をご了承下さい。

商品をより安全にご利用頂く為、商品のご利用前、ご利用後は保冷剤や氷などをタオルで包み、使用部位を十分に冷却して下さい。(10秒程度)

この商品は、熱で物理的に照射する商品です。安全を考慮し開発されてはおりますが、熱を利用する以上、ヤケド等の炎症が発生する可能性があります。ご理解、ご了承の上、注意深く商品をご利用下さい。また、商品を使用してヤケド等の問題が発生した場合でも、当社では如何なる責任も負いかねますのでご了承下さい。

## ●ご使用と取扱についてのお願い

- ・電源プラグのピンや接触部に埃や水が付いている場合は乾いたタオルで拭いてください。
- ・電源コード部分を引っ張ったり、濡れた手で電源プラグを触ったりしないでください。
- ・電源プラグをコンセントから抜いたり差し込んだりする際、本体の電源スイッチがオフになっているか必ず確認してください。
- ・電源コードを無理に曲げたり重いもので押して破損しないように注意してください。
- ・プラグを差し込んだ状態で本機器を放置せず、使用後は必ずコードを抜いてください。
- ・コード、プラグ及び本体の損傷、水濡れにより機器が動作しない場合、お客様相談窓口に連絡して検査と修理を受けてください。
- ・本製品を修理エンジニア以外は絶対に分解又は改造しないでください。
- ・使用中のストーブや熱器具近くで使用する場合は、コード線及び製品が当たらないように注意してください。
- ・本機器を落下の可能性がある高い場所や濡れた場所で使用しないでください。  
故障の原因になります。

## ●お手入れについてのお願い

- ・本製品は水洗いは出来ません。洗剤は使わず乾いたタオルできれいに拭いてください。
- ・本体はシンナー・ベンジン・アルコール除光液などでふかないでください。  
変色や故障の原因になります。

## ●保管についてのお願い

- ・高温多湿の場所で保管しないでください。  
変色や故障の原因になります。
- ・本体裏面にあるメインスイッチをOFFにしてから電源コードを抜いた状態で保管してください。

## ■製品仕様

ランプ	キセノンランプ
熱量調整	10段階
光源	Pulsed Light (パルスライト)
電源	100V
本体サイズ	W215mm×D290mm×H90mm
プローブ重量	120g
総重量	約1.6kg
安全装置	Touch Sensor
標準構成品	本体、サングラス、電源コード、クーリングバック、取扱説明書、カートリッジ

## ■動作条件

温度	5℃～35℃
湿度	30～80%RH
定格	定格入力：AC100V/AC200V、周波数：50Hz/60Hz 入力電圧範囲：AC90V～240V、最大電力：220W


## ■保管条件

温度	-20℃～80℃
湿度	0～95%RH


※製品の性能を改善するための設計及び仕様は予告なく変更される場合があります。

## 各部の名前

### ■ 本体


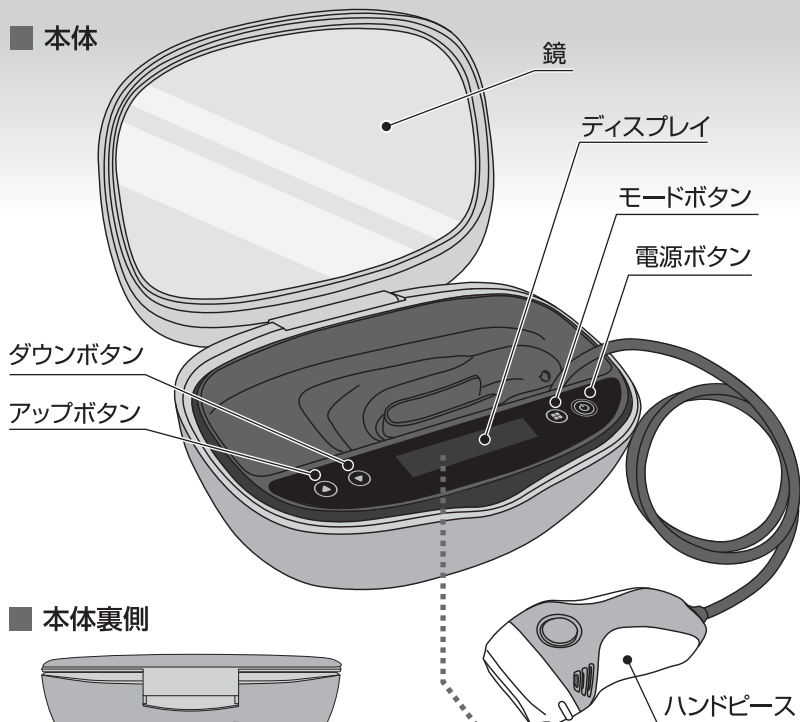


### ■ 本体裏側

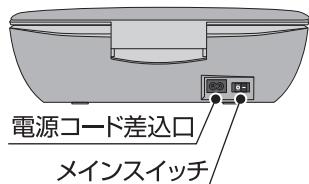


ハンドピース

### ■ ディスプレイ

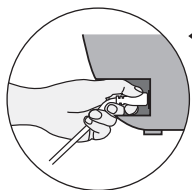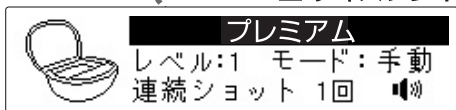


◀電源コードが使用中  
抜けないように、堅  
い成形となっております。  
窪みのところ  
までしっかりと差し  
込んでください。

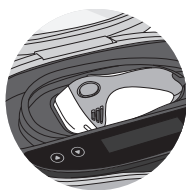

◀ハンドピースを本体  
に収納する際は、接  
続コードのねじれ、  
折り曲げに十分で注  
意ください。  
(断線する場合があります。)

## 各部の名前


### ■ ハンドピース

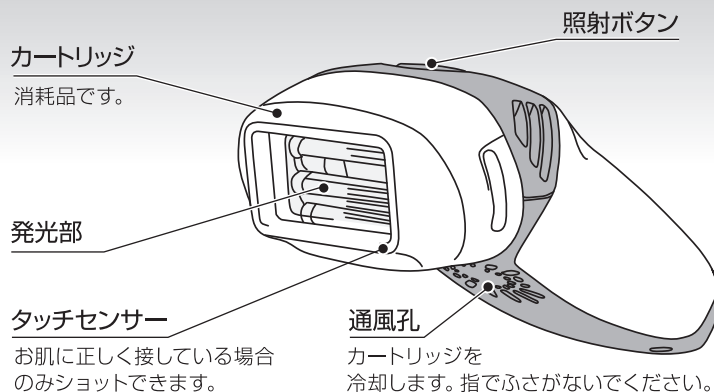


### ■ アクセサリー



◀取扱説明書  
ご使用前によく  
お読みください。

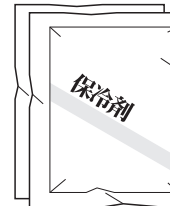

◀クーリングバック  
照射前後のお肌を  
冷やします。  
(10秒程度)

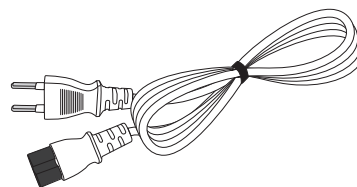


▲電源コード




▲サングラス  
照射の際は必ず  
ご使用ください。

## 照射する周期について

- 体毛の成長期に照射しましょう  
体毛には、約4～6週間で一周する成長周期があります。その周期は**成長期・縮小期・休止期**の3段階に区分されます。メラニン数値が一番高い**成長期**の体毛にフラッシュ照射をおすすめします。
- ※一度毛を剃る、またはカットしてからチクチクと生えてきた毛が成長期の毛となります。

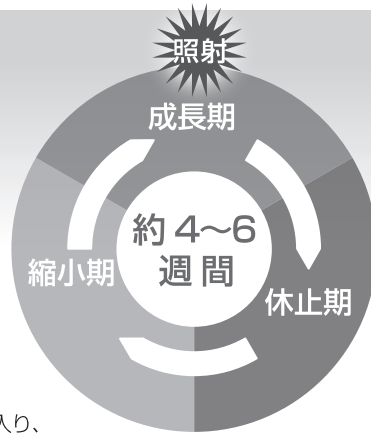

- 約2週間の間隔で照射しましょう  
照射後、縮小期・休止期の体毛が成長期に入り、再び照射が必要になります。フラッシュ脱毛は約2週間の間隔で行います。

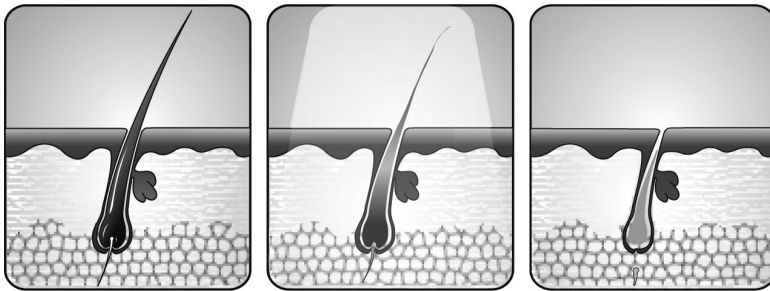


体毛成長期 → 照射 → 2週間あける

- 照射に必要な回数と間隔とは  
最初の使用から次の使用まで、約2週間間隔をあけてください。変化が確認できるまでは、最低4～5回の使用が必要です。(個人差があります。)その後、再発の毛の様子を見ながらのご使用をおすすめしております。ただし、追加の照射が必要な場合は、お肌の様子を見ながらご使用ください。

## 照射できる部分


- 照射できる部分と照射の時痛みを感じる部分  
部分によって照射時に痛みを感じる場合があります。

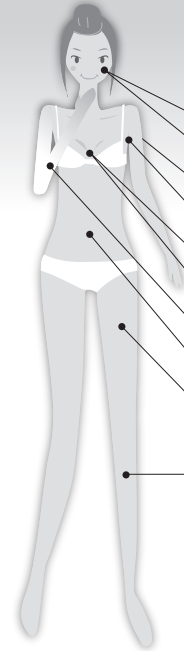

部分	特徴	痛み
●顔(男性)	毛が太く毛根も深い	痛みを感じやすい
●顔(女性)	毛根は浅い	それほど痛みを感じない
●背中	皮膚が厚い	それほど痛みを感じない
●ワキ	毛が太く毛根も深い	痛みを感じやすい
●胸(男性)	毛が太く毛根も深い	痛みを感じやすい
●胸(女性)	毛根は浅い	それほど痛みを感じない
●腕	腕の毛根は浅い	それほど痛みを感じない
●お腹	毛根は浅い	それほど痛みを感じない
●太もも	脂肪の量が多い	それほど痛みを感じない
●ひざ下	毛が太く、位置によっては深い	位置によっては痛みを感じる

※痛みの感覚には個人差があります。毛根が深くしっかりした毛には、長期間の使用をおすすめします。皮膚の弱い部分、粘膜等には使用しないでください。

- 痛みを減らすには…

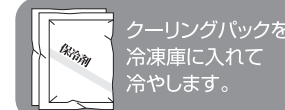

照射直前、照射する部位をクーリングバックで冷やします。(10秒程度)



照射後、クーリングバックで照射した部位を冷やします。(10秒程度)

- 肌色によって照射レベルを調整しましょう



肌色によって照射レベルを変えてください。



▲上記に該当する肌色の方、または部位には使用できません。


## 本格的な使用前に必ずおこなってください

- カミソリまたはシェーバーで余分な体毛を処理してください  
光は、メラニンに反応します。効率良く照射する為には、深剃り等を行わず、使用前の前日に毛並みにそって処理をおこなってください。軽く、優しく剃ってください。

- 照射部位を洗浄してください  
使用前に照射する部位を洗浄し、清潔にしてください。

- 肌の確認  
(本機操作方法についてはP16~の「使い方」を参考にしてください)  
本製品をご使用前に、照射する部位の肌に異常がないことをご確認ください。  
(傷口、しっしん、ほくろ、刺青、しみ等のある部位には使用しないでください。)

- 肌への照射テスト  
はじめての使用時には照射レベルを1(弱)にして腕や手の甲に試験照射をおこない、24時間以上経過後に水泡やただれ、やけど、その他の反応症状が、照射部位およびその周辺に生じていないか確認してください。  
照射前後にクーリングパックで肌を10秒程度冷却してからご使用ください。

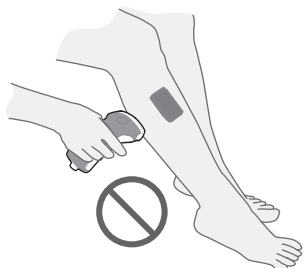

**Check!**

ワックスやピンセットによる除毛を行わない

体毛を完全に抜いた状態の肌に使用した場合、照射の効率が悪くなり、肌を傷めるおそれがあります。

**Check!**

照射前にローション、クリーム、オイル等を使用しない

照射前の肌にローション、クリーム、オイル等を塗らないでください。照射の効率が悪くなり、肌を傷めるおそれがあります。

## 本格的な使用前に必ずおこなってください

- 照射レベルの調整  
肌へのテストをおこなった後、照射レベルの調整をおこなってください。  
アップボタンで徐々に照射レベルを上げ、強すぎると感じたなら、ダウンボタンで照射レベルを下げ、ご自身のお肌に合ったレベルを見つけましょう。

強 弱


照射レベルの強弱を調整

レベル: 1  
12345回 使用可能

ディスプレイにて照射レベルを確認してください。


- ハンドピースの正しい肌へのあてかた  
ハンドピースはカートリッジを付け替えることで脱毛器または美顔器としてご利用頂けますが、基本的な使い方は同じです。

### ハンドピースの照射面を肌に直角にあてる

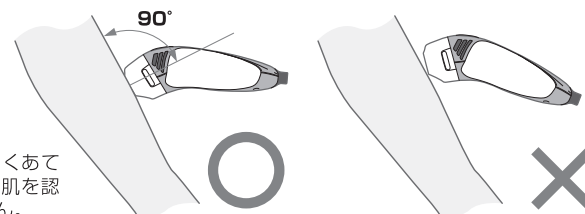

ハンドピースを肌に正しくあてないとタッチセンサーが肌を認識せず、照射ができません。

### 肌にすきまなく照射する

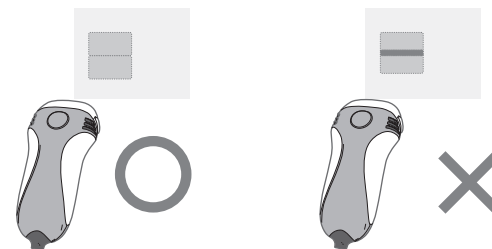

照射面に肌にすきまなく照射しましょう。  
照射面をずらした時、前に照射した面に重ならないよう注意しましょう。



## オプション機能の使い方

### ●モードボタンの機能

モードボタンを利用する事で、KE-NONの様々な機能を利用する事ができます。モードボタンは、押す毎にメニューが切り替わります。


【カートリッジ残量】

【連続ショット設定】

【ショットモード】

【音量】


【画面調整】

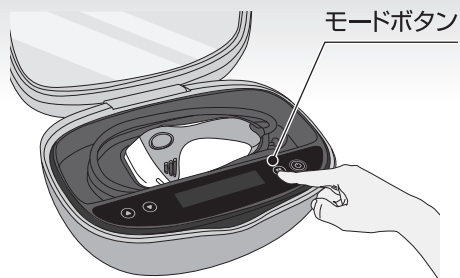

### 1. カートリッジ残量

- 現在、装着しているカートリッジが設定されているレベルで、後何回使用できるかが表示されます。

カートリッジに搭載されているランプは、消耗品となっており、残りのランプ残量がカートリッジ内部のICで管理されています。低いレベルにすると、照射回数が増え、高いレベルにすると、照射回数が減少します。

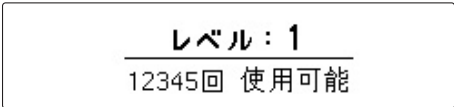

### 2. 連続ショットの設定

- シングルショット(1連射)、トリプルショット(3連射)、セクスタブルショット(6連射)をアップボタン、ダウンボタンで切り替える事ができます。

個人差がございますので、一概にはどのショットモードが良いとは言えませんが、この脱毛器は新たに開発された、特殊な発光方式を採用する事により、連射数が多い方が、多くのエネルギーを発生しますが、痛みが少ない傾向があります。

但し、毛根が深い場所にある部位に照射する場合は、シングルショットモードの方が変化を実感しやすい傾向があります。



## オプション機能の使い方


### 3. ショットモード

- 手動照射モードと自動照射モードをアップボタン、ダウンボタンで切り替える事ができます。

手動の場合は、ハンドピースを肌に密着させた状態で、照射ボタンを押す事で光が照射されます。

自動の場合は、ハンドピースを肌に密着させた状態で、照射ボタンを1度押した後、自動的に照射が開始されます。

※100回照射を行うと、再度ボタンを押す必要がございます。

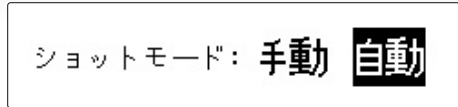

### 4. 音量


- 各動作の確認音の音量をアップボタン、ダウンボタンを押す事で変更する事ができます。



【ミュート】→【音量小】→【音量大】

### 5. 画面調整

- 画面表示を調整できます。画面が見にくいと感じられた場合、アップボタン、ダウンボタンを押して、一番見やすい状態に調整して下さい。

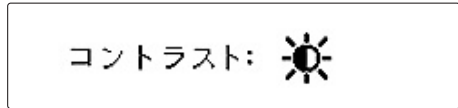

### 6. 英語表示

- 表示言語を日本語から英語に変えることができます。JAPANESE (日本語) ENGLISH (英語) いずれかをご選択下さい。




## 照射のしかた

### 1. 照射プランを立てる

- 照射するための照射範囲をあらかじめ決めておきましょう。

安全で効率のよい処理を行なうため、照射する範囲をあらかじめ決めておき、同じ部位を重ねて照射したり、照射し残しをなくしましょう。照射する範囲、照射レベル、日時などをノートなどにメモしておくことをおすすめします。

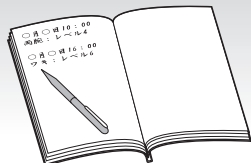


4週間以内に日焼けした部位には使用しない。  
やけどのおそれがあります。

### 2. 脱毛器用カートリッジを装着

- 脱毛器用カートリッジを  
ハンドピースに装着する。

※脱毛器用カートリッジは購入時、  
ハンドピースに装着されています。


※カートリッジの着脱は、本体の電源が完全にOFFになっている事を確認してから行って下さい。

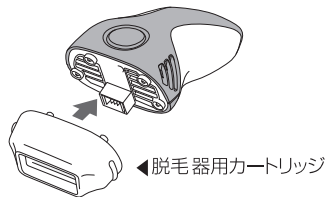


### 3. 電源を入れる

- コンセントを差し込み、本体裏面にある  
メインスイッチを押してください。

[○ -]の- (マイナスマーク) 側が電源ONとなり、メインスイッチがONになると、電源ボタン右側の赤いLEDが点灯します。電源ボタンを押すと、中央のディスプレイにご注意事項が表示されます。アップボタン、ダウンボタン、モードボタンのいずれかを押し、「KE-NON」の文字が表示され、本体が使用可能になります。  
※ぬれた手で電源プラグを触らないでください。

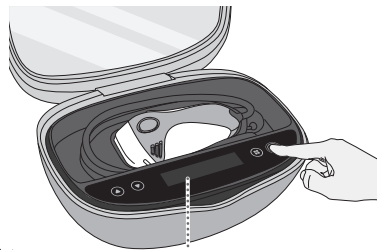


- 装着されたカートリッジを自動認識し、脱毛器モードであることをディスプレイで表示します。

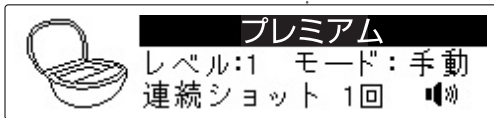

## 照射のしかた

### 4. 照射レベルを選択する


- アップ・ダウンボタンで照射レベルを調整してください。

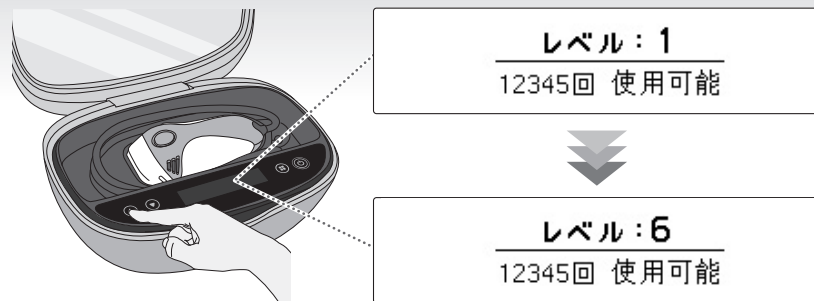



### 5. ハンドピースを照射部に押しあて 照射を開始してください

- ハンドピースの照射ボタンを押し照射を開始します。

※ボタンを押している時間が短すぎますと、正しく光が照射されない場合がございます。

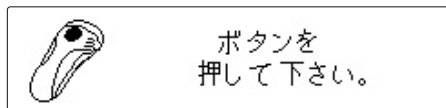

- 刺激をやわらげるため、照射前にクーリングパックでお肌を冷やしましょう。  
(10秒程度)

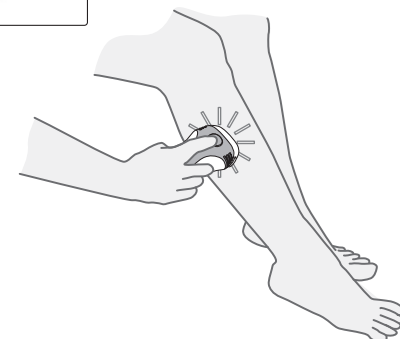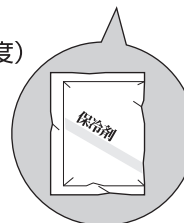

## 照射のしかた

### 6. クーリング

- 照射部位をクーリングバックで冷却してください。


使用前は肌への刺激を和らげるため、また使用後は熱を帯びた部位を冷やすために、照射充電している間、クーリングバックで照射前や照射後の肌を10秒程度冷却します。



**注意** 使用直後は照射カートリッジの発光面に触らない。  
やけどのおそれがあります。

### 7. 予定した部位全体に照射

- 5-6を繰り返して、照射した部位が重ならないように注意し、予定した部位全体に照射する。

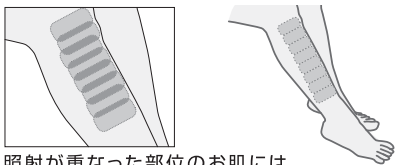

照射が重なった部位のお肌には負担がかかります。

### 8. 照射し終わったら

- 電源スイッチをオフにし、本体裏面にあるメインスイッチをオフにする。
- カートリッジの掃除  
カートリッジ及びフィルターに汚れが付着したままのご使用は、故障、事故、発火、ランプ破損の原因になりますので、ご使用直後に必ずアルコール等で汚れをふき取って下さい
- ハンドピースを本体に収納する。
- 電源コードをコンセントから抜く。
- 本体に収納し、フタを閉めて保管する。

### Check!

#### ハンドピースの安全装置

連続使用によりカートリッジの温度が一定以上高くなった場合、本体のセンサーが作動し、安全装置により一定時間作動が停止します。  
故障ではなく安全モードの作動です。しばらく休ませてから再びご使用ください。

### Check!

#### 使用後の肌ケア


- ・照射した部分を24時間以内に日光にさらさないでください。
- ・故意に日光浴や日焼けをしないでください。
- ・照射後、野外活動の必要がある時は、サンプロッククリームを2週間以上使用してください。(SPF++30以上)
- ・48時間以内に、塩素処理をしたプールで泳がないでください。
- ・照射直後は刺激のある化粧品類を使用せず、照射部位に保湿クリームをつけてください。
- ・脱水防止のため、水分をたくさん摂取してください。
- ・冷水でのシャワーで、熱を帯びた照射部位を、冷ましてください。24時間以内に温水でのお風呂、サウナなどはひかえてください。

## スキンケアのしかた (オプション機能)

### 1. スキンケアの照射プランを立てる

- スキンケアするための照射範囲をあらかじめ決めておきましょう。

安全で効率のよいスキンケアを行なうため、照射する範囲をあらかじめ決めておき、同じ部位を重ねて照射したり、照射し残しをなくしましょう。照射する範囲、照射レベル、日時などをノートなどにメモしておくことをおすすめします。

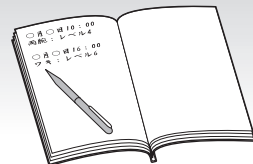


**注意** 4週間以内に日焼けした部位には使用しない。  
やけどのおそれがあります。

### 2. スキンケア用カートリッジを装着

- スキンケア用カートリッジをハンドピースに装着する。

※スキンケア用カートリッジは、別売りオプション品です。


※カートリッジの着脱は、本体の電源が完全にOFFになっている事を確認してから行って下さい。

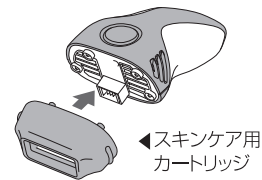


### 3. 電源を入れる

- コンセントを差し込み、本体裏面にあるメインスイッチを押してください。

[○ -]の- (マイナスマーク) 側が電源ONとなり、メインスイッチがONになると、電源ボタン右側の赤いLEDが点灯します。電源ボタンを押すと、中央のディスプレイに「KE-NON」の文字が表示され、本体が使用可能になります。  
※ぬれた手で電源プラグを触らないでください。

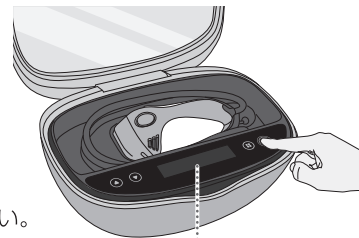

- 装着されたカートリッジを自動認識し、スキンケアモードであることをディスプレイで表示します。

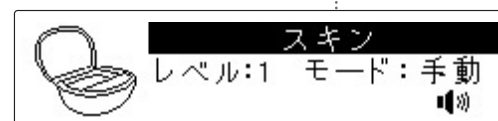

## スキンケアのしかた (オプション機能)


### 4. 照射レベルを選択する

- アップ・ダウンボタンで照射レベルを調整してください。

ハンドピースの照射ボタンを【長押し】して照射を開始します。

- ※長押しの時間によって連続で光る回数が異なります。(最大10回連続で光ります)

照射が終了すると自動的に充電が開始されます。適切なレベルは、ご使用頂く部位や個人差によって異なります。お肌の状態を確認しながら、少しずつレベルを上げてください。

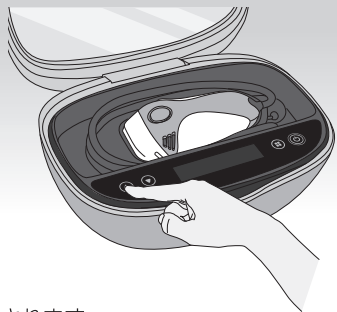

### 5. ハンドピースを照射部位に押しあて照射を開始してください

- ハンドピースを肌に正しく押しあてハンドピースの照射ボタンを押し照射を開始します。



ボタンを押しして下さい。

- 刺激をやわらげるため、照射前にクーリングパックでお肌を冷やしましょう。(10秒程度)



### 6. クーリング

- 照射部位をクーリングパックで冷却してください。使用後は熱を帯びた部位を冷やすために、照射充電している間、クーリングで照射後の肌を10秒程度冷却します。



クーリングパックで冷やす

## スキンケアのしかた (オプション機能)

### 7. 予定した部位全体に照射

- 5.6.を繰り返して、照射した部位が重ならないように注意し、予定した部位全体に照射する。



照射が重なった部位のお肌には負担がかかります。

### 8. 照射し終わったら

- 電源スイッチをオフに、本体裏面にあるメインスイッチをオフにする。
- ハンドピースを本体に収納する。
- 電源コードをコンセントから抜く。
- 本体を収納し、フタを閉めて保管する。



注意

使用直後は照射カートリッジの発光面に触らないやけどのおそれがあります。


### Check!



#### ハンドピースの安全装置

連続使用によりカートリッジの温度が一定以上高くなった場合、本体のセンサーが作動し、安全装置により一定時間作動が停止します。故障ではなく安全モードの作動です。しばらく休ませてから再びご使用ください。

### Check!

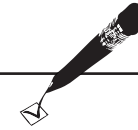

#### 使用後の肌ケア

使用後は、お肌が乾燥しやすくなります。お肌に優しいタイプの保湿化粧品等でしっかり保湿してください。1週間に1回程度を目安にご使用ください。ご満足頂ける結果を得る為には、長期的に繰り返しご使用頂く必要があります。

## Q&A

### Q. 照射された光を間接的に見ても問題ありませんか？

- A. 本製品はハンドピースにタッチセンサーが設定されており、ハンドピースが肌に正確に接触していない場合は、光を照射されない安全設計です。  
もし光を間接的に見たとしても、目に害はありませんが、直接目に対する照射は絶対に行わないでください。

### Q. 付属の保冷剤はなぜ必要なのですか？

- A. 本製品は肌への刺激を最小限に抑えていますが、ご利用いただく際には肌をいたわる必要があります。光を照射する前後に、保冷剤で10秒程度しっかりと肌を冷却しながら行ってください。冷却が足りない場合や冷却方法を誤ると、刺激を感じたり、肌へのダメージが生じる可能性がありますのでご注意ください。

### Q. 使用前に毛を完全に取り除かなくてはなりませんか？

- A. 使用する前日に毛並みにそって処理を行ってください。ワックスやテープ、毛抜きなどで毛を抜いた場合、エネルギー吸収が減り結果が得にくくなります。

### Q. 照射後に毛がそのまま残っていますか？

- A. いくらかの毛はそのまま残っていることがあります。この体毛は、照射を継続的にこなうことで自然に抜けていきます。無理にワックス、テープ、毛抜きなどで抜かないでください。

### Q. 使用后日常活動をするのに問題がないですか？

- A. 日常活動をするには問題ございません。ただし、照射した部分を24時間以内に日光にさらさないでください。

### Q. 顔に使用しても問題ないですか？

- A. 顔に照射する時には、もっとも注意が必要です。目、唇部位に直接照射しないでください。

### Q. すべての人のすべての毛が全部処理できますか？

- A. 人の性格や顔付がそれぞれ異なることのように肌や毛の特性もまちまちです。光によく反応する方もいれば、反応しない方もいます。人それぞれ部位によって個人差があり、太くて深い毛であれば、処理が難しくなることもあります。

### Q. 灰色、薄い茶色、赤い毛も照射できますか？

- A. 基本的に黒い色か濃い茶色の体毛にご利用いただけます。

## Q&A

### Q. どのくらいのペースで使えばいいですか？

- A. 約2週間の間隔でご利用ください。誰にでも毛周期というものがあり、一度処理した体毛は、一定の時間が経たなければ、照射に適した状態になりません。毛周期のことを考え、同じ場所へ照射する場合は2週間は間を明け、最低でも4~5回は繰り返し、5回目以降が必要な場合はお肌の様子を見ながらご利用ください。

### Q. 全身照射できますか？

- A. ヒゲやVライン、指毛など、一般的な家庭用脱毛器では照射が難しい箇所も含め、ほぼ全身にご利用いただけます。ただし、お顔の一部（※主に眼球付近）や、Iライン、Oラインなど、皮膚が薄く、お肌の色が異なる場所は、安全の為に避けてご利用ください。

### Q. 痛くないですか？

- A. 照射時間を短くする事で、高い出力でありながら、肌への刺激を最小限に抑えています。ただし、トリプルショットを利用したり、敏感な部分に照射すると、痛みを感じることもあります。初めてご利用される場合は、弱いレベルからはじめ、刺激に慣れてきたら徐々にレベルを上げていくことをおすすめします。また、痛みは肌の色や毛の色、太さなどで感じ方が変わります。痛みや赤みを抑えるには、お肌を冷やしながらかご利用ください。（10秒程度）

### Q. 1回打てば毛が生えなくなるんですか？

- A. 1回で毛が生えなくなることはありません。継続的にご利用ください。これは医療機関やエステサロンで照射の施術を受ける場合も同様です。体毛には毛周期というサイクルがあり、成長している毛は全体の1/3程度で、残りは退行、もしくは休止している状態です。レーザーやフラッシュは黒い色に反応する為、休止している箇所に照射しても無意味です。つまり、休止している箇所は、体毛が成長期に入らなければ、いくら照射しても変化はいたしません。医療機関やエステサロンの場合は、1年間で6回（2ヶ月に1回）の施術が多いようですが、2週間に1回のペースで、最低でも4~5回は繰り返しご利用ください。

### Q. 皮膚ガンとかになったりしませんか？

- A. 皮膚ガンの原因の一つと言われているのは紫外線です。全く異なる性質の光を出しておりますので、ご安心ください。

### Q. 市販の冷却ジェルやクリームを使用しても良いですか？

- A. 故障や肌トラブルの原因となりますので、照射時にお肌への塗布は推奨しておりません。

## 故障かな?と思ったら

製品に問題があると、ディスプレイの表示が変わり、問題の内容をお知らせします。

### カートリッジが未装着、または正しく装着されていない場合



カートリッジを  
取り付けて下さい。

カートリッジの装着を確認してください。

### 電源の安全装置が作動した場合



電源に異常があるため  
使用できません。  
お電話ください。

お客様相談窓口までお電話ください。

### ハンドピースのファンが停止した場合



ファンが動作しないため  
使用できません。  
お電話ください。

ハンドピースの吸気口に異物が混入して  
いないか、確認してください。  
問題解決しない場合は、お客様相談窓口  
までお電話ください。

### カートリッジの温度が一定レベル以上に上昇した場合



冷却中です。

そのまましばらくお待ちください。  
温度が下がると再び通常通りご利用いた  
だけになります。  
問題解決しない場合は、お客様相談窓口  
までお電話ください。

ケノンお客様相談窓口 0570-064-331

受付時間/AM10:00~PM5:00 月~金(祝日弊社休業日を除きます)

## 故障かな?と思ったら

顧客サポートを要請する前に、以下の“故障修理”項目を参照してください。


こんなとき	チェックポイント	解決方法
製品が作動しない	電源プラグがACコンセントにちゃんと挿し込まれているか確認してください。  製品のカートリッジが過熱したかどうか確認してください。  電源プラグが損傷しているか、または本体が水に濡れたことがなかったか確認してください。	電源プラグをコンセントに挿してください。  そのまましばらくお待ちください。 温度が下がると再び通常通りご利用いただけるようになります。  故障の可能性がある為、お客様相談窓口までお問い合わせください。 直接分解したり修理したりしないでください。
ディスプレイが表示されない	メインスイッチが入っているか確認してください。	解決しない場合はお客様相談窓口までお問い合わせください。
鏡に傷がある	保護フィルムが付いているか確認してください。	保護フィルムをとり除いてください。

製品が本来の完全な状態でない場合、サービス費用が無料でなくなる場合があります。問題が続く場合、お近くの代理店又はお客様相談窓口で必要な情報や指示を受けてください。

## カートリッジのお手入れ

### ●カートリッジの掃除

カートリッジ及びフィルターに汚れが付着したままのご使用は、故障、事故、発火、ランプ破損の原因になりますので、ご使用直後に必ずアルコール等で汚れをふき取って下さい

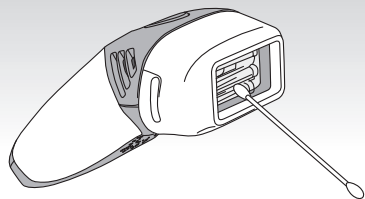


### ●カートリッジの交換


カートリッジは消耗品であり光源寿命があります。使い終わったカートリッジは新しいカートリッジに交換してください。



各カートリッジの使用回数がディスプレイに表示されます。

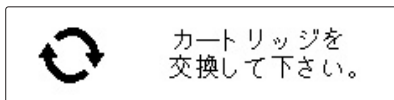

左記のように表示されましたら新しいカートリッジに交換してください。

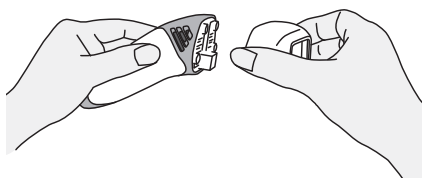

使用したいカートリッジに交換してください。

1. カートリッジの着脱は、本体の電源が完全にOFFになっている事を確認してから行って下さい。
2. ハンドピースを片手で持ち、カートリッジの両サイドを指で押さえ、引き抜きます。  
※少し堅い場合があります。その場合は、左右それぞれ交互に引き抜く力をかけて頂き、少しずつずらすように引き抜いてください。
3. 使用したいモードのカートリッジを差し込みます。  
※端子の向きや数などに注意し差し込んでください。

## まゆ毛脱毛器の使い方

※まゆ毛脱毛器はオプション機能となります。

### ●まゆ毛脱毛器を初めて使用するお客様へ

まゆ毛脱毛器は、毛を抜けやすくすると共に、繰り返しご利用頂くことで、むだ毛ケアの手間が徐々に軽減される脱毛器です。光を用いた照射とは異なり、その変化は非常にゆっくりとしている為、変化を実感しにくい場合がありますのでご了承下さい。

## 1. 電源を入れる


- コンセントを差し込み、本体裏面にあるメインスイッチを押してください。

[○ -]の一(マイナスマーク)側が電源ONとなり、メインスイッチがONになると、電源ボタン右側の赤いLEDが点灯します。

電源ボタンを押すと、中央のディスプレイに「KE-NON」の文字が表示され、本体が使用可能になります。



## 2. まゆ毛脱毛器を取り出す

- 親指と人差し指でまゆ毛脱毛器の白いボタン部分を持ってください。

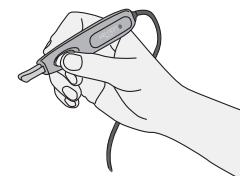

## 3. 処理する

- 処理したい毛、1本の出来る限り根本に近い部分にピンセットをあて、白いボタンを強く押し、毛をつまんでください。その間、ディスプレイに「まゆ毛脱毛器を使用中です」と表示されます。  
※強く押しすぎるとピンセットの歪みやセンサー異常など故障の原因となりますのでご注意ください。
- ディスプレイのバーが右端まで一杯になりましたら、そのまま毛を引き抜いてください。

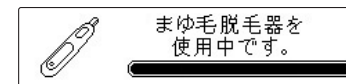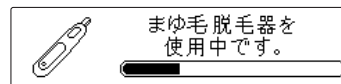

## 4. 処理が終わったら

- 電源スイッチをオフに、本体裏面のメインスイッチをオフにする。
- まゆ毛脱毛器を本体に収納する。
- 電源コードをコンセントから抜く。
- 本体を収納し、フタを閉めて保管する。

### Check!

毛を引き抜く方向  
毛を引き抜く場合は、毛の流れに沿って、引き抜いてください。皮膚を直接つままないように注意してください。  
また、ご使用頂く前に温かい蒸しタオルなどで使用部位を温め、マッサージして頂く事で、毛穴が開き、痛みが緩和されます。

## 【修理規定】

- 取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お客様相談窓口へ送付のうえ、修理いたします。  
(イ)保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お客様相談窓口へ修理をご依頼のうえ、商品と本書をご送付ください。  
(ロ)お客様相談窓口へ修理をご依頼にできない場合は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。
  - ご転居などでユーザー登録確認が取れない場合は、販売店に相談ください。
  - ご贈答などでユーザー登録確認が取れない場合は、保証期間内であっても有償修理対応となります。
  - 保証期間内でも次の場合には、有料修理又は修理対応をお断りします。  
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。  
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移動輸送落下などによる故障及び損傷。  
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。  
(ニ)一般家庭用以外(例えば、車両、船舶への搭載など)に使用された場合の故障。  
(ホ)本書のご提示がない場合。  
(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。  
(ト)消耗部品の交換。
  - 修理をご依頼された場合、お客様相談窓口へ送付頂く際の送料はお客様負担となります。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。
  - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※This warranty is valid only in Japan.

## 保証書

この保証書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間以内に、取扱説明書の注意書に従った正常な状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無料修理いたしますので、お客様相談窓口へ修理をご依頼のうえ、商品と本保証書をご送付ください。

※印欄に記入がない又は納品書が無い場合は無効となりますので、ご注意ください。

型名	Ke-non(ケノン)
保証期間	お買い上げ日より <b>本体 1年間</b> (消耗部品は除く)
※お買い上げ日	年 月 日
※お客様	お名前
	ご住所
	TEL ( ) -
販売店	※お買い上げ店名
	※住所
	※TEL

修理メモ

お客様個人情報取扱について

お客様にご記入戴いた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全活動のために記載内容を利用して戴く場合がございますので、ご了承ください。